



Gamme de lits EasyCare® de Joerns®
À l'avant-garde de l'évolution du lit



Gamme de lits EasyCare de Joerns® La nouvelle gamme de lits EasyCare de Joerns offre la meilleure qualité de sa catégorie et possède des caractéristiques répondant aux différents besoins en matière de soins de vos résidents tout en respectant le budget de votre établissement. Le lit à profil bas à hauteur réglable de la gamme de lits EasyCare comporte une plate-forme de soutien grillagée éprouvée qui assure la sécurité du résident, quelle que soit sa position, le système de direction CenterLine™ qui facilite les manœuvres et un cadre toroïdal dont la robustesse est 30 fois supérieure à celle des cadres en cornière d'acier. La mobilité, le tableau de commandes pour le personnel, le dispositif d'aide et la poignée de maintien permettent de choisir plus facilement le lit correspondant aux besoins des résidents, à bon prix.

Caractéristiques

- 1 **Architecture toroïdale** du cadre du lit en acier 30 fois plus solide que la cornière.
- 2 **Surface thérapeutique grillagée** qui procure une meilleure circulation et le meilleur soutien de surface de sommeil possible.
- 3 **Plate-forme de soutien du matelas à quatre sections** qui offre une vaste gamme de positions confortables et thérapeutiques pouvant contribuer à réduire les cisaillements cutanés.
- 4 **Panneaux de lits attrayants** offerts en un éventail de modèles et de couleurs.
- 5 **Tableau de commandes pour le personnel** permet aux dispensateurs de soins de choisir les fonctions pouvant être ajustées par le résident (optionnel).
- 6 **Soulève-jambe EasyLift** permet de repositionner rapidement le résident afin d'améliorer la circulation (modèles EasyCare 5, 7 et 9).
- 7 **Pattes courbées révolutionnaires** offrant une grande stabilité et beaucoup d'espace pour l'équipement.
- 8 **Quatre moteurs c.c.** qui assurent un fonctionnement constant et étonnamment silencieux.
- 9 **Gamme de déplacements de 7 po à 30 po** qui garantit la sécurité, que la hauteur du lit soit extrêmement basse ou maximale (modèles EasyCare 5, 7 et 9).
- 10 **Dispositifs d'aide** dotés d'une fonctionnalité supérieure et situés à une hauteur idéale.
- 11 **UltraLock** est situé au pied du lit, tandis que le système de direction Centerline se trouve à la tête du lit afin de maximiser la sécurité et la mobilité quelle que soit la hauteur (modèles EasyCare 7 et 9 seulement).



Modèle EasyCare 7 illustré

GAMME DE LITS EasyCare



EasyCare 9

- Cadre UltraCare XT
- Plate-forme EasyCare
- Hauteur réglable
- Tableau de commandes optionnel pour le personnel
- UltraLock et système de direction Centerline
- Télécommande ergonomique
- Soins rapides



EasyCare 7

- Cadre UltraCare XT
- Plate-forme EasyCare
- Hauteur réglable
- Tableau de commandes optionnel pour le personnel
- UltraLock et système de direction Centerline



EasyCare 5

- Cadre UltraCare XT
- Plate-forme EasyCare
- Hauteur basse
- Tableau de commandes optionnel pour le personnel



EasyCare 3


- Cadre UltraCare XT
- Plate-forme EasyCare
- Hauteur basse
- Gamme de déplacements de 8 po à 27 po
- Tableau de commandes optionnel pour le personnel

ACCESSOIRES



CareWide

CareWide width extension kit transforms the EasyCare to 39" or 42" instantly without tools. Great for added comfort and fall prevention.

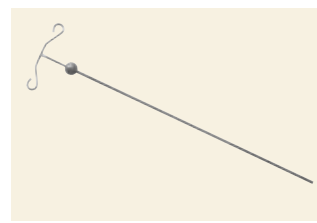

Tige à soluté

La tige à soluté s'ajuste en hauteur permettant de localiser les fluides selon la position du lit.



Rallonge de 4 po


La rallonge de 4 po ajoute 4 po à la plate-forme de soutien du matelas, permettant ainsi d'installer un matelas de 84 po sur un lit de 80 po, ou un matelas de 80 po sur un lit de 76 po.



Trapèze et adaptateur

Le trapèze est ajustable de sorte que les résidents peuvent facilement l'atteindre. De plus, il comporte trois positions de fonctionnement, offrant ainsi une flexibilité accrue.

DISPOSITIFS D'AIDE

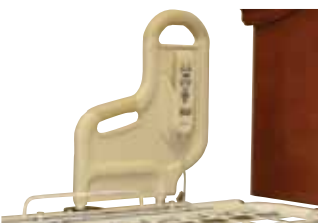

Poignée de maintien de luxe

La poignée est installée à une hauteur ergonomique, permettant ainsi d'aider les résidents à s'allonger et à sortir du lit. De plus, un support à télécommande intégré se trouve de chaque côté de la poignée. (Télécommande du modèle EasyCare 9 illustrée)



Dispositif d'aide

Ce dispositif a été conçu de manière à ce que le résident n'ait pas l'impression que ses mouvements sont restreints. Ils sont installés à une hauteur idéale pour aider les résidents à s'allonger et à sortir du lit.



Poignée de maintien

Sa conception ergonomique aide les résidents à s'allonger et à sortir du lit.

OPTIONS RELATIVES AU SYSTÈME DE LIT



Matelas en mousse

PrevaMatt de Joerns

Grâce à la composition spéciale de nos matelas Deluxe et Elite, avec ou sans matériel TEMPUR®, le matelas épouse la forme du corps du patient.



Système d'air de Joerns

Notre gamme complète de systèmes d'air thérapeutiques comprend les fonctions avancées de CairRails. Leur conception unique améliore le traitement des plaies.

SPÉCIFICATIONS DE LA GAMME DE LITS EASYCARE DE JOERNS

Construction du cadre

- Tous les principaux composants structurels, y compris la plate-forme de soutien du matelas, sont conçus avec des tubulures d'acier afin d'offrir une stabilité structurelle supérieure.

Renseignements supplémentaires

- Toutes les surfaces d'acier exposées sont revêtues d'une peinture époxy en poudre.
- Les fixations, les vis, les rivets et les autres pièces non peintes sont anticorrosion.
- Tous les interrupteurs de commande sont des interrupteurs à contact momentané.
- Le panneau de tête de lit s'enlève facilement si des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire doivent être effectuées au cours d'une situation d'urgence.

Brevets américains

- 6473922, 6474869, D445, 614 Autres brevets en instance

Certifications — Certifié ETL

- **États-Unis** : conforme à la norme UL 60601-1, 1re éd., 2003
- **Canada** : certifié CAN/CSAC22.2 NO. 601.1-M90, CAN/CSASTD C22.2 NO. 60601-2-38-03
- **International** : conforme à la norme IEC 60601-2-38, 1re éd., 1996, IEC 60601-2-38, Amendement 1, 1999

Conditions extérieures

Conditions de fonctionnement :

- Température ambiante : de + 10 °C à + 40 °C
- Humidité relative : de 30 % à 75 % sans condensation
- Pression atmosphérique : de 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions d'expédition et d'entreposage :

- Température ambiante : de - 40 °C à + 70 °C
- Humidité relative : de 10 % à 100 %
- Pression atmosphérique : de 500 hPa à 1 060 hPa

	EasyCare 3		EasyCare 5		EasyCare 7		EasyCare 9	
Taille du lit	80 po	76 po	80 po	76 po	35 po x 80 po	35 po x 76 po	80 po	76 po
Surface de soutien	35 po x 80 po	35 po x 76 po	35 po x 80 po	35 po x 76 po	35" x 80"	35" x 76"	35 po x 80 po	35 po x 76 po
Longueur totale du PT ¹	83½"	80"	83½"	80"	83½"	80"	83½"	80"
Longueur totale standard du PT/PP ¹	85½"	82"	85½"	82"	85½"	82"	85½"	82"
Largeur ²	35 po		35 po		35 po		35 po	
Hauteur minimale	7 po		7 po		7 1/4 po		7 1/4 po	
Hauteur maximale	30 po		30 po		30 1/2 po		30 1/4 po	
Espace sous le lit ³	23 3/4 po		23¾ po		23¾ po		23¾ po	
Charge sécuritaire de travail ⁴	500 lb		500 lb		500 lb		500 lb	
Poids du produit	220 lb		220 lb		279 lb		279 lb	
Angle maximum du dossier	65° à l'horizontale		65° to horizontal		65° à l'horizontale		65° à l'horizontale	
Angle maximum du genou	35° à l'horizontale		35° to horizontal		35° à l'horizontale		35° à l'horizontale	
Gamme de déplacements de la plate-forme de soutien du matelas	<1 po		<1 po		<1 po		<1 po	
Hauteur de mobilité	8¼ po		7 po		7 po		de 7 1/4 po à 30 po	
Tension principale	120 VAC		120 VAC		120 VAC		120 VAC	
Fréquence	60 Hz		60 Hz		60 Hz		60 Hz	
Courant d'entrée	3,5 amp.		3,5 amp.		3,5 amp.		4,0 amp.	
Protection électrique	Classe I ou II, Type B		Classe I ou II, Type B		Classe I ou II, Type B		Classe I ou II, Type B	
Cycle de charge	10 % (2 min Fonction/ 18 min Arrêt)		10 % (2 min Fonction/ 18 min Arrêt)		10 % (2 min Fonction/ 18 min Arrêt)		10 % (2 min Fonction/ 18 min Arrêt)	

1 **LONGUEUR** : PT signifie panneau de tête de lit, tandis que PP/PT signifie panneau de tête et panneau de pied de lit

2 **LARGEUR** : avec les poignées du dispositif d'aide : 36 po; avec les dispositifs d'aide : 41 po

3 **ESPACE** : espace suffisant variant de 14 po à 30 po

4 **CHARGE SÉCURITAIRE DE TRAVAIL** : comprend la literie, le résident, la surface de soutien et tous les accessoires

Couleur

Le modèle de lit Care 100 de Joerns est offert dans une couleur pâle.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer des dimensions ou de modifier la fiche technique selon les tendances de design, les améliorations apportées aux produits ou pour des raisons hors de notre contrôle. Les options de couleur ont été reproduites aussi fidèlement que le permettaient les procédés d'impression.



www.joerns.com • email: info@joerns.com

Soins actifs, postactifs et à domicile

5001, Joerns Drive
Stevens Point WI 54481
Tél. : 1-800-826-0270
Télé. : 1-800-457-8827

VA/Gouvernement

19748 Dearborn Street
Chatsworth, CA91311
Tél. : 1-800-966-6662
Télé. : 1-800-232-9796

Bureau au Canada

1000, chemin Clarke, Bureau 6
London (Ontario) Canada N5V3A9
Tél. : 1-866-546-1151
Télé. : 519-451-8662